



ПОТЕНЦИОСТАТ-ГАЛЬВАНОСТАТ «Р-150Х»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Черноголовка – 2018

www.potentiostat.ru

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение нашего оборудования. Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе работы, устройстве и характеристиках мощного потенциостата-гальваностата типа Р-150Х и указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

Этот мощный потенциостат является достаточно универсальным и поддерживает большинство электрохимических экспериментальных методов – вольтамперометрия, потенциометрия, кулонометрия, хронопотенциометрия, циклическая и линейная развертки потенциала или тока, а также многие другие. Также он может быть использован для многодневных циклических испытаний различных ХИТ, заряда-разряда электродов, коррозионных, электрокаталитических и ресурсных испытаний материалов и различных электрохимических объектов и систем.

Потенциостат Р-150Х позволяет работать по двух, трех или четырехэлектродной схемам подключения к электрохимической ячейке, как в потенциостатическом, так и в гальваностатическом режимах при токах от 15 А до 50 мкА.

Управляющая программа ES8, входящая в комплект поставки, позволяют управлять прибором с помощью персонального компьютера. Имеется возможность работы, как с единичными экспериментами, так и в режиме циклического многошагового программатора, позволяющего последовательно выполнять заданные пользователем режимы работы многократно.

Потенциостат Р-150Х имеет собственную энергонезависимую память, в которую резервируются все данные, получаемые в ходе работы. После запуска работы, прибор может быть отключен от компьютера для автономной работы.

Во время выполнения работы гарантируется сохранность всех полученных экспериментальных данных и сохранение полного контроля над экспериментом независимо от подключения к компьютеру.

В приборе и управляющей программе имеются средства пользовательских защит и функции самодиагностики прибора.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием прибора, просьба обращаться по электронной почте: potentiostat@mail.ru.

Также, просим Вас обращаться по указанному электронному адресу с Ваши просьбами, пожеланиями или замечаниями, касающимися работы прибора и программного обеспечения.

Обновления программ, дополнительную информацию, список продукции и документацию по ней Вы можете найти по адресу в интернете: www.potentiostat.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

I	Описание и работа прибора	5
1.1	Технические характеристики	5
1.2	Комплектность поставки	9
1.3	Устройство и принцип работы	10
II	Подготовка прибора к использованию	13
2.1	Меры безопасности	13
2.2	Подготовка к работе	15
2.3	Программное обеспечение и драйвера	16
2.3.1	Рекомендации по подключению прибора к компьютеру	16
2.3.2	Установка программы и драйверов	16
2.3.3	Запуск управляющей программы	17
2.3.4	Работа с программой ES8	18
III	Эксплуатация прибора	22
3.1	Обеспечение максимальной помехозащищенности при проведении измерений	22
3.2	Основные схемы включения прибора	23
IV	Гарантийные обязательства	24
V	Сведения о сертификации	25

I. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные возможности потенциостата-гальваностата Р-150Х:

- Регистрация потенциала разомкнутой цепи
- Потенциостатический режим работы
- Гальваностатический режим работы
- Ступенчатый потенциостатический режим
- Ступенчатый гальваностатический режим
- Линейная развертка потенциала
- Циклическая развертка потенциала
- Линейная развертка тока
- Циклическая развертка тока
- Хроноамперометрия
- Хронопотенциометрия
- Хронокулонометрия
- Потенциостатический сигнал произвольной формы
- Гальваностатический сигнал произвольной формы
- Линейная поляризация
- Циклическая поляризация
- Потенциодинамический режим
- Гальванодинамический режим
- Режим пошагового циклического программатора
- Циклический заряд - разряд ХИТ (программатор)
- Пользовательская защита по току и потенциалу
- Функции самодиагностики на встроенном эквиваленте
- Встроенная энергонезависимая память экспериментальных данных
- Двухступенчатое включение ячейки – с помощью электромагнитного реле и быстродействующего твердотельного ключа
- Продолжение работы при отключении управляющего ПК

Таблица 1**Основные характеристики потенциостата-гальваностата Р-150Х**

Основные параметры:	
Количество каналов	1
Подключение ячейки	2, 3, 4 электрода,
Контроль ячейки	Потенциостатический, гальванистический, вольтметр
Мощность:	
Максимальная поляризующая мощность	150 Вт
Максимальная нагрузочная мощность	150 Вт
Напряжения, потенциалы:	
Максимальное выходное напряжение	± 12 В (максимально достижимое)
Номинальное выходное напряжение	± 9 В (при токе, соответствующем максимальному)
Диапазоны потенциала (напряжения) и их разрешения	± 2 В (70 мкВ) ± 9 В (400 мкВ)
Предел допускаемой приведенной погрешности для диапазонов потенциала	± 0.2 % (погрешность приведена к верхнему пределу каждого диапазона)
Входное сопротивление электрометра потенциала / входной ток	10 ¹¹ Ом / менее 20 пА
Скорость развертки потенциала минимальная	10 мкВ/с
Скорость развертки потенциала максимальная	20 В/с *
Токовые характеристики:	
Максимальный поляризующий ток не менее	± 15 А
Максимальный нагрузочный ток не менее	± 15 А
Пределы допускаемых приведенных погрешностей для диапазонов тока	диапазон 15А: ± 1 %, диапазон 1А: ± 0.2 %, диапазон 100 мА: ± 0.2 %, диапазон 10 мА: ± 0.2 %, (погрешность приведена к верхнему пределу диапазона)
Разрешение по току	1 / 30000 от максимума для каждого диапазона
Минимальный рекомендуемый рабочий ток	50 мкА
АЦП, ЦАП:	

АЦП, ЦАП	2 синхронных АЦП, 16 бит, 5 мс. 1 ЦАП, 16 бит, 5 мс
Максимальная / минимальная скорость регистрации данных в потоке:	200 / 0.01 точек/с
Максимальное количество точек данных энергонезависимой памяти	800 тысяч
Общие параметры:	
Интерфейс ПК	USB
Гальваническая развязка USB-интерфейса	Есть
Требования к ПК (минимальные)	P1000, 512 MB RAM, Win 9x, 2000, XP, 7, 8
Дополнительные требования к ПК	Русский язык операционной системы, стандартный размер шрифтов системы. Разрешение экрана по вертикали - не менее 900 пикселей, по горизонтали – не менее 1000 пикселей, рекомендуемое разрешение – 1920x1080
Габаритные размеры, мм	370×233×101
Масса без упаковки, кг	6.3
Максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока	500 Вт
Связь земли прибора с силовым заземлением розетки 220В	Всегда соединен

* В зависимости от диапазона потенциала и величины скорости развертки, будет выбираться высота шага цифрового синтеза развертки.

Прибор предназначен для работы от сети переменного тока с напряжением (220±10) В и частотой 50-60 Гц при нормальных климатических условиях эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
относительная влажность окружающего воздуха, %	45-80
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	86-106 (645 – 795)

Не рекомендуется постоянно эксплуатировать потенциостат на пределе его возможностей. Рекомендуется ограничиваться токовыми и мощностными параметрами на уровне 75% от максимально допустимых для Вашего прибора. Такой подход не сильно снизит эксплуатационные возможности прибора, однако значительно продлит срок его службы. Максимальные характеристики в общем случае рассчитаны прежде всего на недолговременное режимы работы.

Также необходимо внимательное обращение с низкоомными образцами при работе с ними в каком либо потенциостатическом режиме. В таких случаях настоятельно рекомендуется использовать гальваниостатические режимы.

Минимально рекомендуемое омическое сопротивление тестируемого образца для потенциостатического режима для различных диапазонов потенциала прибора:

Диапазон потенциала

± 2 В

± 9 В

Минимальное омическое сопротивление

1.5 миллион

10 миллион

Внимание: при более низких омических сопротивлениях работоспособность прибора в потенциостатическом режиме не гарантируется.

Если в Вашем эксперименте требуется работа в потенциостатическом режиме на низкоомном образце – оставляйте запас по току. В противном случае велика вероятность срабатывания защиты прибора по максимальному току с принудительной остановкой эксперимента. Также это правило справедливо и для гальваниостатических режимов, если они выполняются чередованием с потенциостатическими и в работе планируются переключения из гальваниостатических режимов в потенциостатические.

1.2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Комплектность поставки потенциостата-гальваностата Р-150Х

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Потенциостат Р-150Х	1	
Сетевой шнур питания	1	Для включения прибора в сеть 220 В
Провод подводящий экранированный с зажимом "крокодил" и BNC разъемом	2	Для подключения объектов измерения – потенциальные электроды
Силовой провод с зажимом "крокодил" и клеммой	2	Для подключения объектов измерения – токовые электроды
Провод подводящий с зажимом "крокодил" и штыревым разъемом типа "банан"	1	Для заземления прибора или подсоединения экрана исследуемого образца
Кабель интерфейсный USB	1	Для подключения прибора к ПК
Компакт-диск с программой управления и установочными драйверами	1	Для работы в стандартной операционной системе
Руководство по эксплуатации	1	
Коробка упаковочная	1	

Комплектность поставки и внешний вид прибора могут быть изменены производителем и не отражены в настоящем руководстве.

1.3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Потенциостат-гальваностат Р-150Х смонтирован в металлическом корпусе. Внутри него находится импульсный блок питания, радиатор охлаждения усилителя, аналоговая плата потенциостата с узлами управления. Блок схема прибора приведена на рис. 1.

Потенциостат Р-150Х имеет два предусилителя - один для тока ($i-U$), другой для потенциала (U). С них сигнал подается на селектор типа работы (S_1 – выбирает режим работы потенциостат – гальваностат) и на двухканальный АЦП. С селектора типа работы S_1 сигнал обратной связи подается на усилитель потенциостата, а с него на усилитель мощности УМ. Коммутатор S_2 служит для подключения электрода Counter (включения ячейки). Он состоит из электромагнитного реле и быстро действующего твердотельного ключа.

Микроконтроллер (ЦПУ) с ядром Cortex M3 полностью контролирует выполнение созданной пользователем программы, анализирует данные тока, потенциала, рассчитывает заряд, проверяет наличие перегрузок, признаков остановки и выполняет все остальные рабочие функции. Также микроконтроллер связан с микросхемой энергонезависимой Flash-памяти. Данные в нее записываются сразу же после их появления по одной точке на всех скоростях регистрации прибора. Эта память полностью стирается только (каждый раз) перед каждым новым запуском работы прибора. Микроконтроллер также соединен с гальванически развязанным USB-интерфейсом.

Помимо прочего, в состав потенциостата входит входной релейный коммутатор (K), который подключает потенциостат либо к внутреннему эквиваленту (\mathcal{E}), либо к внешним разъемам на передней панели. Внутренний эквивалент представляет собой постоянный резистор с сопротивлением 100 Ом, и служит для проведения диагностики прибора. В выключенном состоянии или в состоянии ожидания работы, потенциостат подключен к внутреннему эквиваленту, а внешние разъемы ни с чем не соединены внутри прибора кроме разомкнутых контактов реле коммутатора.

На передней панели прибора находятся тумблер - индикатор включения питания, разъемы для подключения исследуемых образцов. Прибор подключается к исследуемому образцу четырьмя проводами. Для удобства работы с ХИТ, разъемы, имеют маркировку полярности.

Измерительная земля прибора, соединенная с его корпусом и подключена к силовой земле розетки 220В. Земля USB интерфейса гальванически изолирована от всех этих земель (не соединена ни с одной из них).

На задней панели находятся разъем включения в сеть 220 В, вентилятор охлаждения, сетевой предохранитель и разъем USB для подключения к персональному компьютеру.

На передней панели прибора имеется светодиодный индикатор подключения к внешней ячейке. Он загорается при включении любого рабочего режима или мониторинга. В процессе автоматической диагностики (как и при ожидании работы) вместо внешней ячейки используется внутренний эквивалент и индикатор не горит.

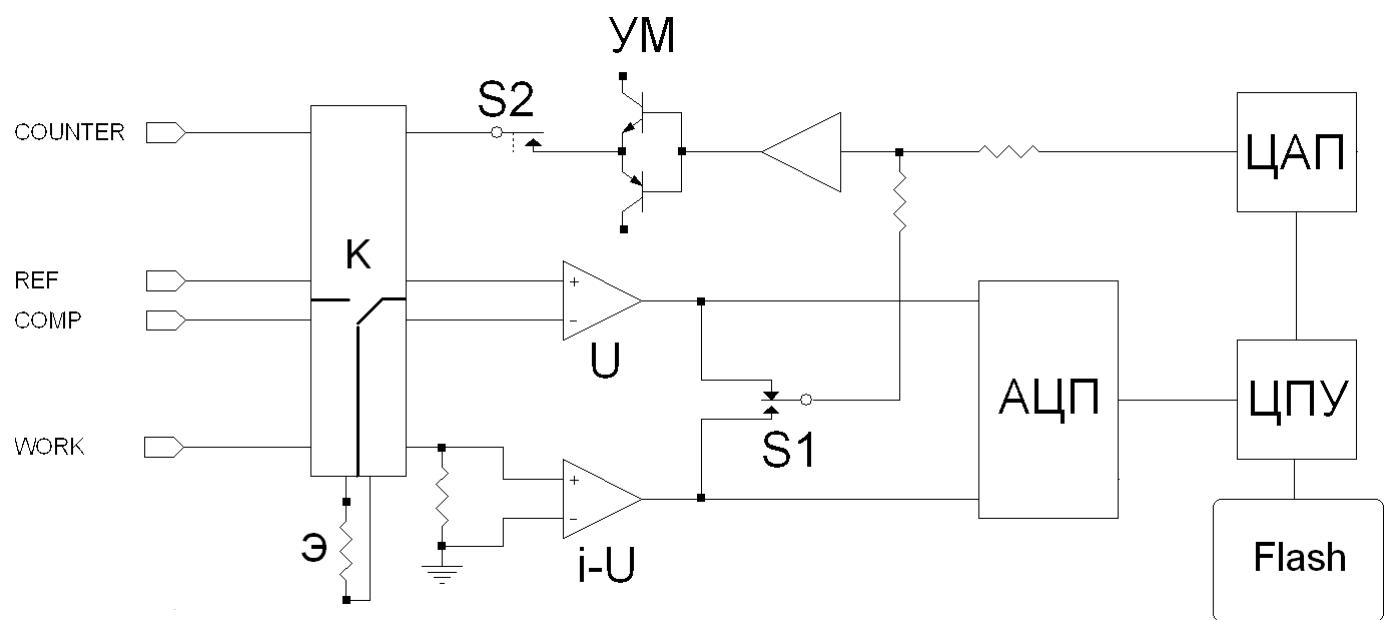


Рис. 1. Блок схема потенциостата Р-150Х.

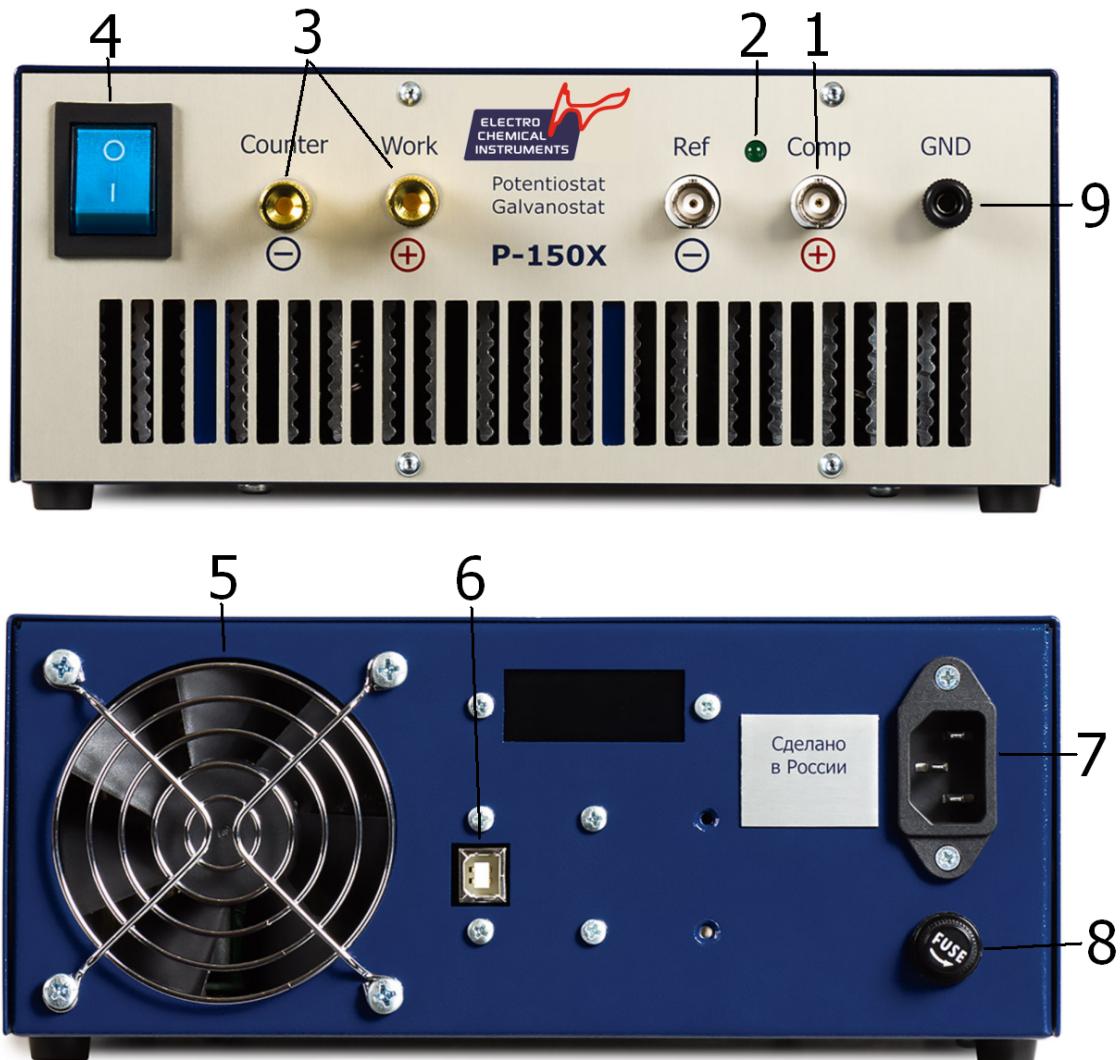


Рис. 2. Потенциостат-гальваностат Р-150Х, передняя и задняя панели:

1 – разъемы для подключения потенциальных измерительных проводов, 2 – индикатор подключения ячейки, 3 – разъемы для подключения клемм силовых проводов, 4 – тумблер и индикатор питания, 5 – вентилятор охлаждения, 6 – USB разъем, 7 – разъем питания 220 В, 8 - гнездо предохранителя, 9 – гнездо заземления.

II. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор имеет следующие аппаратные типы защиты:

- Защита от превышения абсолютного выходного тока на уровне 17 А аппаратно (схемотехническое ограничение тока выходного усилителя мощности);
- защита входных каскадов при превышении входного напряжения не более чем на 20 В от максимального выходного напряжения прибора;
- Защита от перегрева усилителя мощности. В случае превышения максимально допустимой температуры, работа прибора будет остановлена. В управляющем ПО будет выставлен флаг аварии. Продолжить работу можно будет только с помощью ручного перезапуска после того, как прибор остынет до безопасной температуры.

Кроме того, предусмотрены следующие полуаппаратные типы защит:

- перегрузка по току приводит к завершению работы шага-цикла работы. Заводская уставка срабатывания защиты – 16 А. Время срабатывания – 100 мс;
- Защита от превышения напряжения (потенциала) для каждого диапазона потенциала как по измеряемому, так и по задаваемому напряжению (потенциалу). Время срабатывания – 5 мс;
- Пользовательская защита по току (задается безопасное окно от - до, при выходе из которого происходит завершение шага/цикла работы). Время срабатывания – 5 мс. Настраивается пользователем в управляющем ПО.
- Пользовательская защита по потенциальному (задается безопасное окно от - до, при выходе из которого происходит завершение шага/цикла работы). Время срабатывания – 5 мс. Настраивается пользователем в управляющем ПО.

Корпус и шасси прибора электрически соединены с его измерительной землей и соединены с силовым заземлением розетки 220В. Земля USB интерфейса гальванически НЕ соединена ни с одной из этих земель.

Не рекомендуется постоянно эксплуатировать прибор на пределе его возможностей. Рекомендуется ограничиваться токовыми и мощностными параметрами на уровне 75% от максимально допустимых для Вашего прибора. Такой подход не сильно снизит эксплуатационные возможности прибора, однако значительно продлит срок его службы.

Запрещается:

- Эксплуатировать прибор вблизи объектов и установок, являющимися источниками сильного теплового, светового, электрического или электромагнитного излучений, влиянию которых может быть подвержен прибор.
- Попадание жидкости любого типа или механических предметов (через вентиляционные решетки или иначе) внутрь прибора.
- Эксплуатация прибора в условиях повышенной запыленности или коррозионной активности окружающей среды.
- Эксплуатировать прибор в условиях даже кратковременного или импульсного воздействия электрических, электромагнитных, магнитных или иных помех.
- Допускать неадекватные механические воздействия на прибор, вскрывать его, использовать не по назначению, принудительно останавливать вентиляторы охлаждения прибора.
- Эксплуатировать прибор в условиях, затрудняющих доступ воздуха из окружающей среды к вентилятору задней панели и корпусу прибора и отвод тепла через вентиляционные отверстия передней панели и от корпуса прибора в окружающую среду.
- Производить какие-либо действия с исследуемым образцом и кабелями подключения к нему прибора при включенном электроде Counter, в том числе после завершения эксперимента с не выключенным Counter электродом.
- Запрещается подключать к прибору исследуемые объекты активного типа, которые могут являться источниками тока напряжения или мощности превышающими максимально допустимые для данного прибора.
- Запрещается попадание на разъемы подключения электродов (измерительные выводы) прибора напряжения, превышающего максимальное поляризующее напряжение более чем на 20 В.
- Запрещается так или иначе подключать или допускать контакт измерительных выводов прибора с другими электрическими приборами (вольтметры, осциллографы, электронные нагрузки и источники питания, электрический контакт с металлической мебелью, станки, электроинструмент, электрооборудование или электроприборы, подключаемые к сети 220 В и т.п.).

2.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы с прибором внимательно (!) изучите руководство по эксплуатации, а также ознакомитесь с правилами подключения и назначением органов управления на задней и передней панелях прибора.

Если хранение и транспортирование прибора производились в условиях, отличающихся от рабочих, то перед включением необходимо выдержать прибор в рабочих условиях не менее 2-х часов (это необходимо, например, для предотвращения выпадения конденсата на внутренних элементах прибора).

Далее разместите прибор на рабочем месте, обеспечив удобство работы и свободный доступ холодного воздуха к задней стенке прибора, а также свободный отток теплого воздуха от передней. Запрещается подвергать прибор воздействию прямого солнечного света, располагать его вблизи электронагревательных и тепловыделяющих приборов и установок.

Перед проверкой прибора необходимо установить на ПК программу управления прибором и драйвера, находящиеся на прилагающемся к прибору компакт-диске, соединить прибор кабелем с ПК, заземлить и подключить к сети переменного тока. Для включения прибора необходимо нажать красную кнопку на задней панели.

Для проверки прибора можно воспользоваться встроенными в ПО функциями диагностики (обслуживание прибора).

2.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРАЙВЕРЫ

2.3.1. Рекомендации по подключению прибора к компьютеру

- USB кабель подключения прибора к компьютеру необходимо расположить максимально удаленно от кабелей питания сети 220В. Ни в коем случае не переплетайте эти кабели.
- Использование хорошего USB кабеля и хорошее состояние USB разъемов прибора и компьютера обеспечивают максимальную защиту USB интерфейса от помех. Постарайтесь следить за тем, чтобы USB разъем прибора не расшатывался. Обычно это происходит от частых переключений кабеля и ведет к потере надежности контакта экрана кабеля.
- При необходимости использования USB хабов, разветвителей и других подобных устройств, а также замены USB кабеля, пожалуйста, используйте качественное оборудование, постарайтесь избегать дешевых изделий и сомнительных производителей. Рекомендуется использовать профессиональное USB оборудование.
- Постарайтесь не работать на компьютере с другими программами во время работы прибора. Крайне желательно, чтобы компьютер и его операционная система были в хорошем состоянии.
- Для борьбы с помехами прибор рекомендуется заземлить, а исследуемый объект поместить в металлический экран.

2.3.2. Установка программы и драйверов

- Вставьте компакт диск из комплектации прибора в CD привод Вашего компьютера.
- Скопируйте содержимое компакт-диска (папка ES8) в желаемое место на жестком диске Вашего ПК, желательно, чтобы путь к этой папке не содержал русских букв и был как можно короче, лучше всего в корень жесткого диска. В операционных системах Windows 7 и 8 НЕ используйте папки Program Files и иные созданные системой для ее нужд.
- Подключите Ваш прибор к компьютеру и включите его.
- При правильно установленных драйверах прибор должен определяться в списке USB устройств Вашего ПК как FTD2xxDevice или:

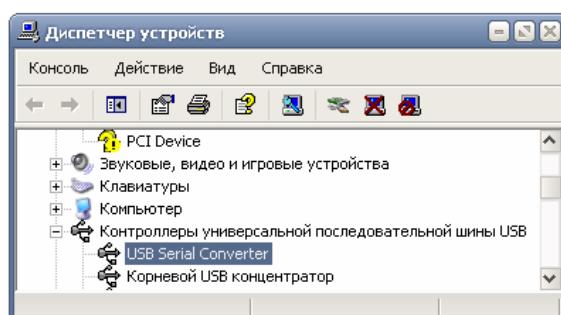


Рис. 3. Вид диспетчера задач операционной системы с подключенным прибором.

При первом подключении прибора, скорее всего, потребуется установить драйвера к прибору. Они находятся в папке Drivers.

Если при включении прибора операционная система сама не откроет мастер установки драйвера, то его необходимо запустить в диспетчере устройств Вашего компьютера. Для этого, в списке USB устройств (или в контроллерах универсальной последовательной шины - см рис. выше) нужно выбрать устройство, которое появляется в момент включения прибора. Далее нужно зайти в его свойства и установить (переустановить, обновить) драйвер.

В появившемся мастере установки драйвера, необходимо выбрать установку из указанного места (НЕ из интернета). Следуя указаниям мастера, установите драйвер из папки Drivers\CDM 2.08.24 WHQL Certified (для этого необходимо будет на одном из этапов установки выбрать эту папку используя кнопку "Обзор" или подобную, в зависимости от типа операционной системы).

Структура и содержимое папки ES8:

└─ ES8	папка, копируемая на жесткий диск компьютера
└─ Doc	папка с документацией
└─ AN	примеры использования (дополнительная документация)
└─ Basic	основная документация (инструкции к приборам и ПО)
└─ Drivers	папка с драйверами
└─ CDM 2.08.24 WHQL Certified	папка, в которой хранится рекомендуемый к ручной установке драйвер прибора
└─ Programs	папка с рабочей программой (запускаемый файл ES8 находится в ней)
└─ CfgFiles	служебные файлы программы
└─ ExportFiles	в этой папке хранятся экспортируемые из программы данные (txt, xls)
└─ Profiles	папка с пользовательскими настройками программы (профайлами)
└─ WorkFiles	в эту папку сохраняются экспериментальные данные (из нее же и открываются)
└─ WorkSetupFiles	в эту папку сохраняются рабочие режимы программатора и единичных режимов

Рис. 4. Структура и содержимое папки ES8.

2.3.3. Запуск управляющей программы

- Подключите к компьютеру прибор и включите его.
- Подождите 5-7 секунд для того, чтобы прибор определился операционной системой.
- Запустите управляющую программу ES8 из папки Programs (красной стрелкой показана запускаемая программа, синей скобкой – папки со вспомогательными файлами программы):

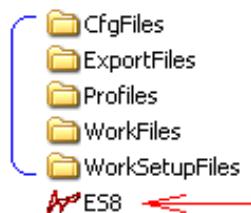


Рис. 5. Структура папки с рабочей программой.

2.3.4. Работа с программой ES8

Потенциостат P-150X работает под управлением специализированного программного обеспечения ES8.

Программное обеспечение (ПО) служит для создания и конфигурирования экспериментальной рабочей программы, запуска работы, отображения, просмотра и первичной обработки экспериментальных данных. При запуске пользователем работы, в прибор загружается созданная на этот момент рабочая программа, полностью стирается память данных. Также в него загружаются настройки пользовательских защит. После этого управляющая программа дает прибору команду запустить работу.

Прибор сам следит за выполнением загруженной в него рабочей программы. Управляющая программа опрашивает прибор с необходимой периодичностью и отображает его текущее состояние. При этом она никак не влияет и не вмешивается в выполнение рабочей программы.

В управляющей программе в любой момент можно отключить прибор от компьютера. При этом прибор продолжит работу без него. Далее можно, например, подключить к программе другой имеющийся прибор и провести необходимые манипуляции с ним. При необходимости, в процессе работы прибора, можно неограниченное число раз подключаться к нему и отключаться от него в управляющей программе. Это никак не отразится на выполнении рабочей программы.

В процессе работы из управляющей программы можно выполнить следующие действия с прибором:

- Следить за выполнением работы, как в графическом, так и в табличном представлении.
- Поставить прибор на паузу, а потом снова его запустить с этого же момента повторным нажатием кнопки “пауза”. В состоянии паузы потенциостат переходит в режим мониторинга, то есть, отображает потенциал разомкнутой цепи (потенциал РЦ) на подключенном образце, но рабочая программа при этом остановлена (время и заряды не инкрементируются, развертки остановлены и не идут, потенциал отображается в ПО, но не сохраняется). Операцию можно повторять сколько угодно раз. Длительность паузы не ограничена.
- Можно принудительно перейти к выполнению следующего шага, цикла программы, или рода работы (установление перед измерением, измерение потенциала РЦ, установление потенциала РЦ и тд, в зависимости от содержания рабочей программы).
- Остановить работу прибора.
- Загрузить из ожидающего работу прибора имеющиеся в нем экспериментальные данные.
- Запустить режим мониторинга и остановить его в любой момент.

После того, как прибор завершил выполнение загруженной в него программы, он переходит в режим ожидания. Если при этом он подключен к программе, то она сразу автоматически загрузит из него все имеющиеся экспериментальный данные, и выставит для него флаг ожидания. После этого можно запустить на нем работу заново, например, с другим образцом, или программно выключить. Если прибор не был подключен к программе, то пользователю необходимо самостоятельно, нажав кнопку загрузки данных, скачать данные из прибора.

Помимо этого, если прибор подключен к компьютеру и программе, то данные будут автоматически загружаться из него прямо в процессе работы. Благодаря этому система прибор-компьютер работает фактически в реальном времени с буферизацией данных в приборе (в его энергонезависимой памяти). В случае возникновения какой либо нештатной ситуации (например, при потере питания 220В), все зарегистрированные данные в любом случае будут сохранены в памяти прибора даже после его выключения, и могут быть отгружены из него в любой момент до следующего эксперимента (или перезагружены в процессе выполнения текущего эксперимента).

Также, в программе можно перейти в режим обработки данных (отображения уже имеющихся, или только что загруженных экспериментальных данных). Это никак не влияет на работу прибора. Та часть программы, которая ответственна за связь с прибором, продолжит сбор и отображение текущих данных. Часть же программы, ответственная за обработку, данных, будет доступна пользователю для детального просмотра, отображения и манипуляции с любыми, уже имеющимися на жестком диске ПК данными. То есть можно обрабатывать, просматривать и манипулировать (удалять, объединять, накладывать друг на друга и т.п.) загруженными или имеющимися на жестком диске экспериментальными данными прямо во время работы прибора.

Более подробную информацию о возможностях программного обеспечения Вы можете найти в документации к программному обеспечению на установочном диске из комплектации прибора или на официальном сайте **www.potentiostat.ru** в разделе загрузок. В настоящем руководстве она не описывается.

Методика установки драйверов, содержимое компакт-диска, внешний вид управляющей программы и ее функциональность могут изменяться по мере обновления как самого ПО, так и приборов, поэтому более подробно описаны в дополнительной документации.

Все необходимые инструкции находятся на установочном диске Вашего прибора. Самые последние версии ПО и всей документации к нему и приборам Вы можете найти на официальном сайте в интернете **www.potentiostat.ru**. Программное обеспечение рекомендуется обновлять хотя бы раз в квартал.

Резюмируя, детальная схема работы прибора и ПО выглядит следующим образом:

- 1) Прибор подключается пользователем в ПО ES8.
- 2) С помощью ПО пользователь создает рабочую программу.
- 3) Пользователь подключает исследуемый объект к прибору.
- 4) Для того, чтобы удостовериться, что исследуемый объект подключен правильно, рекомендуется на некоторое время запустить мониторинг. По величине измеренного потенциала разомкнутой цепи, как правило, можно диагностировать наличие обрывов, переполосовки, неисправности образца и тп.
- 5) Пользователь запускает работу. При этом автоматически произойдут следующие действия: в этот, и только в этот момент в приборе будет стерта память экспериментальных данных, в прибор будет загружена рабочая программа и настройки защит, будет запущена работа. В ПО при этом будет обнулен массив данных, в который будут скачиваться данные из прибора (он также всегда обнуляется при переподключении прибора в ПО или перезапуске самого ПО).
- 6) Непосредственно перед запуском работы, управляющее ПО уточнит у пользователя название запускаемого эксперимента (его изначальный текст будет взят в ПО из строки комментария). Оно будет сохранено в энергонезависимой памяти прибора вместе с экспериментальными данными и станет неотъемлемым их описанием. Так, например, на жесткий диск ПК данные будут автоматически сохраняться с названием файла соответствующему этому описанию. С чтения из памяти прибора этого описания начинается любая загрузка данных из прибора (при этом, это описание будет автоматически обратно вставлено в поле комментария).
- 7) Далее, по ходу выполнения рабочей программы, прибор начнет регистрировать экспериментальные данные и сохранять их в свою энергонезависимую память.
- 8) ПО ES8 при этом будет регулярно и с необходимой частотой запрашивать у прибора его текущее состояние и отображать информацию о его работе пользователю (номер выполняемого шага и цикла, а также время их работы, текущие значения потенциала, тока, заряда, рабочий режим, объем занятой памяти и тп).
- 9) Также при этом ПО будет следить за тем, как заполняется энергонезависимая память прибора. По мере того, как появляются экспериментальные данные, ПО будет автоматически скачивать их из этой памяти и отображать на измерительной диаграмме.
- 10) Если в ходе выполнения работы закрыть ПО или отключить в нем прибор, то после последующего подключения, данные начнут скачиваться с самого начала. При этом, скачанные экспериментальные данные будут появляться на измерительной диаграмме и будут доступны для сохранения пользователем на жесткий диск ПК в любой момент. Текущее же состоя-

ние выполнения рабочей программы будет отображаться в ПО независимо от этого процес-са. При этом, например, может сложиться такая ситуация, что из прибора скачан только еще 5-й цикл данных, а выполняется уже скажем, 10-й. Постепенно процесс скачивания данных догонит процесс регистрации данных и система перейдет в отображение данных в реальном времени.

- 11) При завершении работы обычно, ПО уже имеет все экспериментальные данные скачанными из прибора. В том же случае, если все данные не успели скачаться, они будут докачаны автоматически.
- 12) При необходимости, скажем, если прибор был отключен от компьютера и выполнял всю рабочую программу неподключенным, то после завершения работы (как в штатном режиме, так и например, нештатно при отключении питания) можно также в любой момент скачать из него все экспериментальные данные последнего выполненного эксперимента (только одного, до тех пор, пока не будет запущен новый).
- 13) Сразу после окончания эксперимента или загрузки данных, они автоматически сохраняются на жесткий диск компьютера и становятся доступными для экспорта, просмотра или первичной обработки.
- 14) В процессе работы прибора, в ПО можно в любой момент сохранить все уже имеющиеся (скачанные) данные на жесткий диск для, например, создания предварительно отчета о выполнении длительного многодневного эксперимента.

В приведенной схеме практически все операции выполняются автоматически и незаметно для пользователя. Поэтому совсем не обязательно держать их все в голове. При необходимости, ПО выведет сообщения подсказок, советов, а также предупредит о последующих действиях и событиях, на которые следует обратить внимание. Такой механизм работы обеспечивает максимальную надежность выполнения рабочей программы, а также сохранность экспериментальных данных.

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

Для обеспечения максимальной помехозащищенности при проведении измерений исследуемый объект (например, электрохимическая ячейка, полупроводниковый прибор, элемент питания и т.п.) должен быть помещен в металлический экран. При этом рекомендуется соединить экран и заzemляющий разъем потенциостата с внешним заземлением. Желательно, чтобы внутри экрана находился не только исследуемый объект, но и зажимы «крокодил», которыми провода прибора соединяются с выводами объекта.

Заземление также может понадобиться из-за гальванической развязки интерфейса USB. Из-за нее абсолютный потенциал прибора может оказаться неопределенным, что в некоторых случаях может привести к более сильному воздействию внешних помех. В этом случае можно либо заземлить прибор, либо, в крайнем случае, можно соединить его разъем заземления с корпусом рабочего компьютера при помощи высокоомного резистора сопротивлением более 10 Ком.

При работе с малыми токами (менее 1 мА) или в условиях сильных помех (например, при нагревании исследуемого объекта в мощной электропечи) наличие экрана обязательно, в противном случае результаты эксперимента могут не соответствовать действительности.

При работе по трех или четырехэлектродной схеме наличие экрана также обязательно.

Электрометры прибора собраны на CMOS элементах, поэтому имеют высокое входное сопротивление, но очень чувствительны к электростатическим разрядам и помехам, которые могут вывести их из строя. Поэтому не следует касаться кабелей прибора и металлических частей зажимов «крокодил» в процессе проведения измерений. Подобные действия также могут сильно исказить результаты измерений за счет возникновения кратковременных импульсных помех и нарушения условий экранирования.

Также внешние помехи могут сильно сказаться на стабильности работы интерфейса прибора с ПК. Их источниками могут являться мощные электропотребители, или процессы их коммутации. Например, станки или другой электроинструмент, электропечи и нагреватели, вакуумные насосы, различные электродвигатели, электро-потребители индуктивного или емкостного характера, импульсные потребители и т.п. Воздействие подобных помех может привести к сбоям в работе интерфейса прибора, потерю данных, испорченному эксперименту. Постарайтесь обеспечить наименьшее их воздействие. Приборы имеют в своем составе как аппаратные, так и программные методы защиты интерфейса от этих воздействий, однако, их возможности не безграничны.

3.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА

В потенциостате Р-150Х реализуются три основных способа подключения к исследуемому объекту (электрохимической ячейке): двух-, трех- и четырехэлектродная схемы (рис. 6). Во всех случаях токовыми электродами являются "Counter" и "Work", а соответствующими потенциальными – "Ref" и "Comp".

Во всех случаях прибор стабилизирует величину сигнала электрода "Comp" относительно электрода "Ref" (касательно системы знаков напряжений; положительному напряжению (потенциалу) при этом соответствует положительный ток).

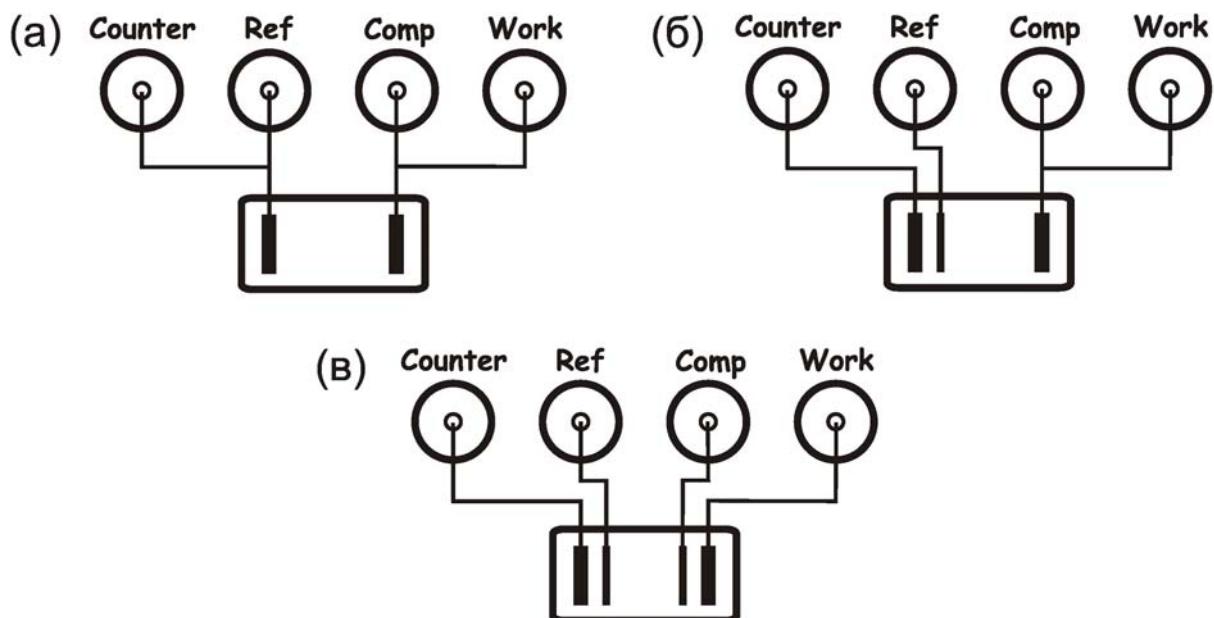


Рис. 6. Подключение по двух- (а), трех- (б) и четырехэлектродной (в) схемам.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленным в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации

– 12 месяцев от даты продажи.

Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности прибора и может доходить до 20 рабочих дней без учета времени доставки.

Гарантийные обязательства не включают в себя устранение проблем некорректной работы с прибором (несоответствующие требованиям настоящего руководства).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, мер безопасности работы с прибором;
- при несоблюдении обязательных мер предосторожностей, требований и запрещающих пунктов, касающихся работы с прибором, приведенных в настоящем руководстве;
- при работе с прибором в недокументированных режимах;
- при неправильной установке или подключении прибора;
- при превышении допустимой рабочей температуры, перегреве и т.п.;
- при наличии внешних и внутренних механических повреждений;
- при нарушении целостности пломб, признаков вскрытия и ремонта прибора неуполномоченными лицами;
- при наличии повреждений, полученных в результате аварий, воздействия огня, влаги, насекомых, пыли или попадания внутрь корпуса посторонних предметов.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание прибора осуществляется предприятием изготовителем.

IV. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н04368

Срок действия с 15.08.2017 по 14.08.2020

№ 0101447

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335. Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Потенциостаты-гальваностаты: тип Р. Серийный выпуск.

код ОК
26.51.43

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 26.51.43-001-0119244659-2017 года.

код ТН ВЭД
9030 31

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИП Астафьева Юлия Андреевна. ОГРНИП: 317505300053154, ИНН: 503121608441. Адрес: 142432, РОССИЯ, г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 2. Телефон/Факс: 84957203157, E-mail: sales@elins.su.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ИП Астафьева Юлия Андреевна. ОГРНИП: 317505300053154, ИНН: 503121608441.

Адрес: 142432, РОССИЯ, г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 2. Телефон/Факс: 84957203157, E-mail: sales@elins.su.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ПС-17-08-319 от 15.08.2017, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КОНСАРД", аттестат аккредитации № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ00023, Схема декларирования соответствия: 1д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия хранения и транспортировка согласно технической и, эксплуатационной документации изготовителя. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.Д-RU.РД01.В.02634.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.В. Дворянкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ИП Астафьева Юлия Андреевна, ОГРНИП: 317505300053154

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская Область, 142432, г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 2, Телефон: 84957203157, Адрес электронной почты: sales@elins.su

в лице

заявляет, что Приборы электроизмерительные : Потенциостаты-гальваностаты: тип Р.
изготовитель Индивидуальный предприниматель, ИП Астафьева Юлия Андреевна,
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Российская Федерация, Московская Область, 142432, г. Черноголовка, ул.
Солнечная, д. 4, кв. 2
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9030310000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ПС-17-08-319 от 15.08.2017, Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "КОНСАРД", аттестат аккредитации № ТЭТ
RU.04ИББО.ИЛ00023, Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Срок службы, условия хранения и транспортировка согласно технической и,
эксплуатационной документации изготовителя. Требования TP TC 004/2011 "О
безопасности низковольтного оборудования" соблюдаются в результате применения на
добровольной основе ГОСТ 22261-94 "СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И
МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН. Общие технические условия"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.08.2020
включительно

ИП Астафьева Юлия Андреевна

(Ф.И.О. заявителя)

(подпись)





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Индивидуальный предприниматель Астафьева Юлия Андреевна,
ОГРНИП:317505300053154

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,
Московская Область, 142432, г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 2, Телефон:
84957203157, Адрес электронной почты: sales@elins.su

в лице

заявляет, что Приборы электроизмерительные : Потенциостат - гальваностат Р-2Х, Р-5Х,
Р-20Х, Р-20Х8, Р-40Х, Р-45Х, Р-150Х, Р-200Х

изготовитель Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель
Астафьева Юлия Андреевна, Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская Область,
142432, г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 2

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9030310000, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ПС-17-09-215 от 15.09.2017, Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "КОНСАРД", аттестат аккредитации № ТЭТ
RU.04ИББО.ИЛ00023, Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Срок службы указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения
стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок
хранения изделия не установлен. Требования ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на
добровольной основе ГОСТ 22261-94 "СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И,
МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН. Общие технические условия

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.09.2022

включительно

Ю.А.
(подпись)

Индивидуальный предприниматель Астафьева Юлия Андреевна
(Ф.И.О. заявителя)

